



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF FINK



Массажное кресло
для дома с 3D
технологией массажа

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Orlauf Fink, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности, изложенные ниже. Это снизит риск возникновения травм и поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажного кресла:

- Осторожно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током;
- Для бесперебойной работы массажного кресла настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр;
- Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха. Например, в сауне, в парной, возле бассейна, в ванной комнате, возле отопительных приборов и т.д.;
- Не используйте кресло вне помещений и в местах с прямым солнечным светом;
- Всегда отключайте вилку питания от электрической розетки сразу после завершения использования массажного кресла, чтобы предотвратить его повреждение при перебоях в подаче электроэнергии;
- Никогда не подключайте и не отключайте вилку питания от розетки мокрыми руками;
- Не оставляйте кресло без присмотра, если оно используется инвалидами или детьми либо установлено в месте их нахождения;
- Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- Только один человек может использовать кресло одновременно;
- Не используйте никакие дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- Не вставайте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- Не засыпайте во время массажа;
- Всегда своевременно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- Не тяните за кабель питания, чтобы отключить или передвинуть массажное кресло;

- Перед включением массажного кресла проверьте, чтобы возле него не было детей, животных или предметов, которые могут попасть под движущиеся части;
- Если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «О» и затем отключите вилку от розетки. Это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания;
- Если вы обнаружили какие-либо разрывы в обшивке кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование массажного кресла;
- Это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может использоваться в других целях;
- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть возможные противопоказания к использованию массажного кресла;
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронные медицинские импланты, например, кардиостимулятор;
- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть одно из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии рецидива;
- Если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом;
- Никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных частях тела;
- Не используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс;
- Не используйте массажное кресло в помещениях, где применяются аэрозольные распылители (спреи) или есть большая концентрация кислорода;
- Это массажное кресло не является медицинским оборудованием и предназначено для обеспечения комфортного массажа и отдыха. Поэтому кресло не может заменить полноценное медицинское лечение;
- Никогда не используйте массажное кресло с пережатыми воздушными шлангами. Не допускайте засорения воздушных шлангов и проникновения внутрь волос и любых других посторонних предметов;
- Проверяйте контакт кожи с нагреваемыми зонами кресла, чтобы снизить риск получения травм. Возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и его чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам;
- Перегрев может быть признаком неправильного использования массажного кресла. Если это произошло, немедленно выключите кресло и выньте вилку из розетки;

- Перед использованием массажного кресла снимите с себя все украшения, часы и другие аксессуары. Также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
- Держите детей подальше от выдвижной секции для ног и других подвижных частей.



Внимание:

- *Не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости.*
- *Не допускайте контакта внешней поверхности кресла с колющими и режущими предметами.*
- *Никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно.*

2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1 Вид спереди и внешние детали



Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла

2.2 Массажный механизм кресла

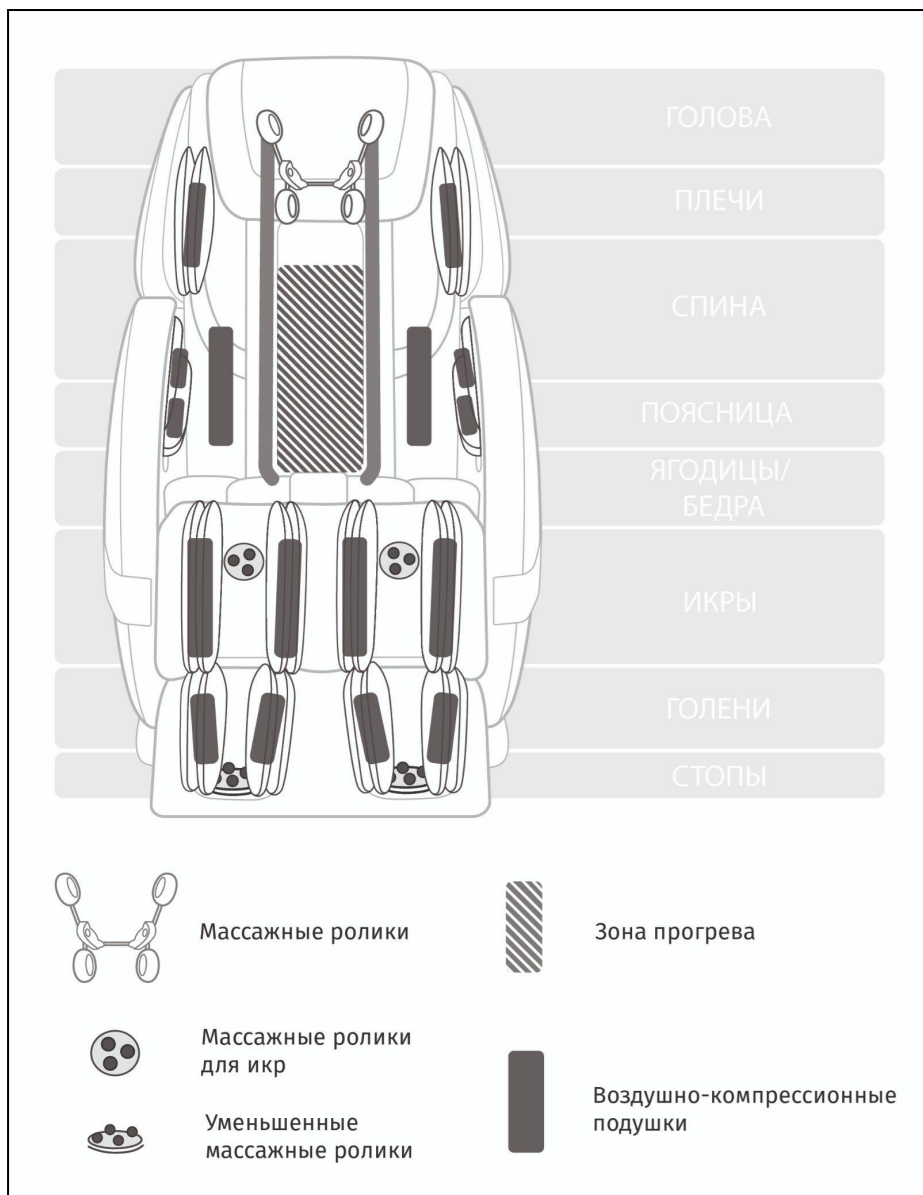


Рисунок 2 — Детали массажного механизма

- Для массажа спины установлено 4 поворотных ролика на удлиненной каретке (от шеи до бедер включительно);
- Для массажа стоп установлено 48 массажных роликов на обе стопы;
- Для массажа икр установлены отдельные группы роликов;
- Зона прогрева в области спины и поясницы;
- Для лимфодренажного массажа установлено 18 воздушно-компрессионных подушек с регулируемой степенью воздействия. Подушки расположены в области плеч, рук, бедер, ног и стоп;
- Секция для ног раздвигается на 15 см электронно.

2.3 Динамики массажного кресла

Название устройства для подключения по Bluetooth — Orlauf Fink.

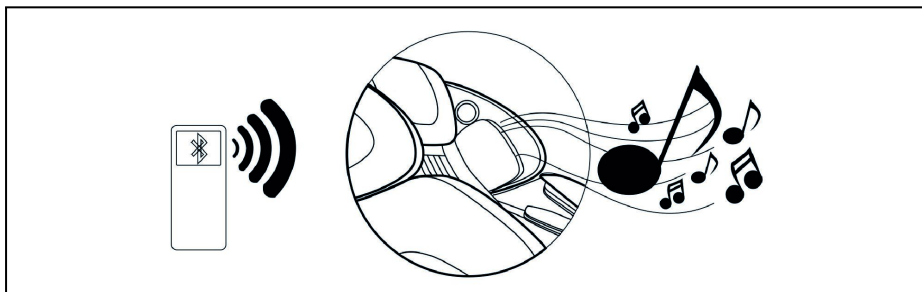


Рисунок 3 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



Примечание! Динамики кресла с помощью Bluetooth могут подключаться единоразово только к одному устройству с Bluetooth. Пожалуйста, после использования выключите Bluetooth на своем устройстве, чтобы другие пользователи могли подключиться к колонкам.

3. СБОРКА И УСТАНОВКА

3.1 Сборка секции для ног

Для сборки кресла требуется только закрепить секцию для ног:

- В первую очередь убедитесь, что крепления секции для ног находятся на одной оси с креплением на сиденье кресла с правой и с левой стороны. Обратите внимание на точки крепления (см. рисунок ниже);
- Проверьте трубки подачи воздуха: они не должны быть согнуты или перекручены;
- Застегните молнию на сиденье кресла.

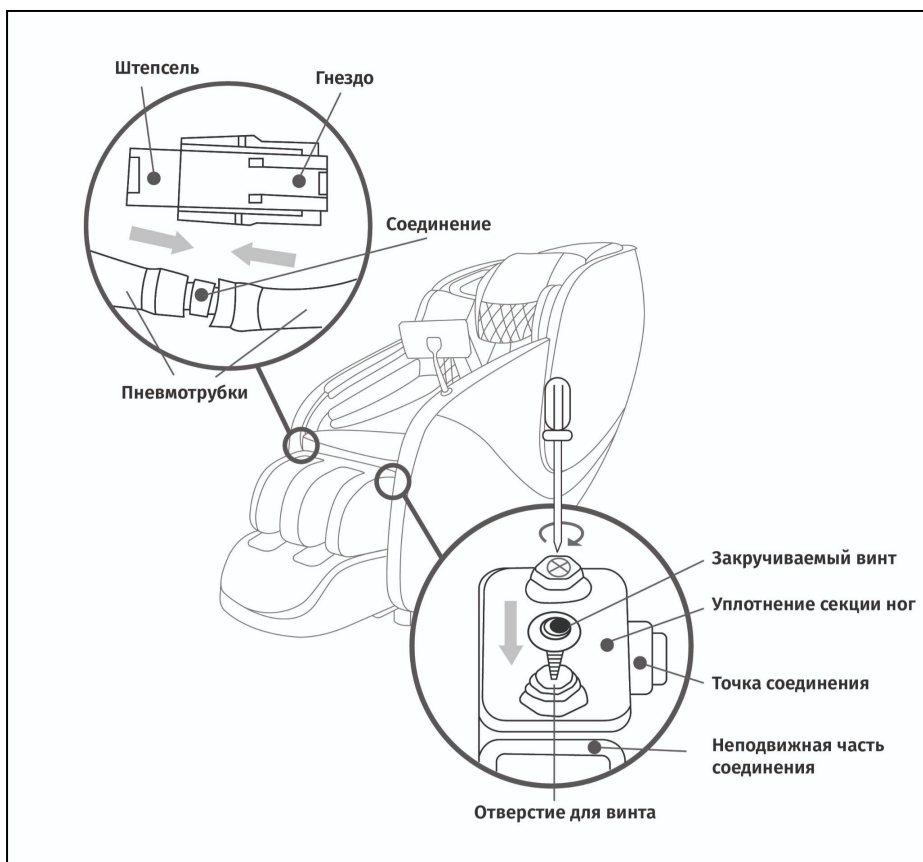


Рисунок 4 — Сборка секции для ног

3.2 Перемещение массажного кресла

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.

Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов

При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой — за секцию ног. Отклоните таким способом кресло на 45 градусов, пока оно не встанет на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и придавить человека.

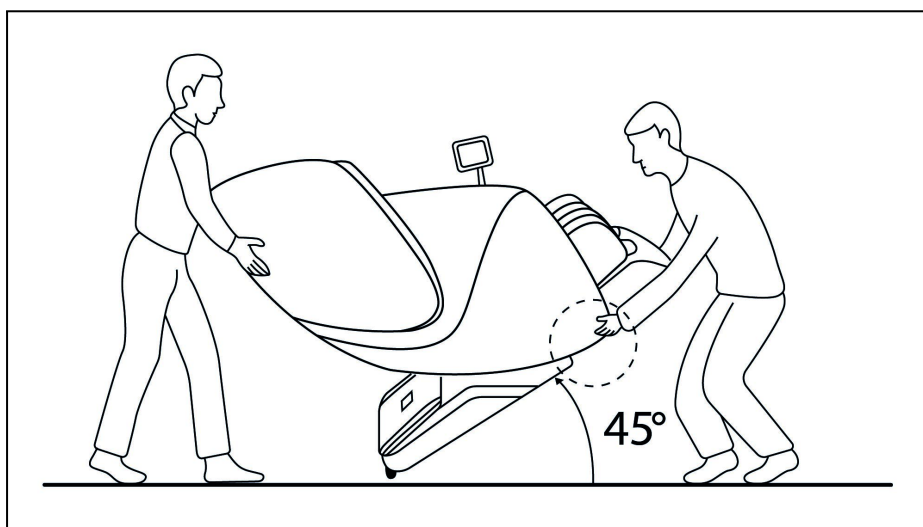


Рисунок 5 — Перемещение кресла с помощью транспортировочных роликов

Вариант 2: без использования транспортировочных роликов

Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору), левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла. Поднимите его и переместите.

Обратите внимание, что вес кресла достаточно большой, поэтому для перемещения нужно как минимум два человека. Есть риск сорвать спину, будьте аккуратны!

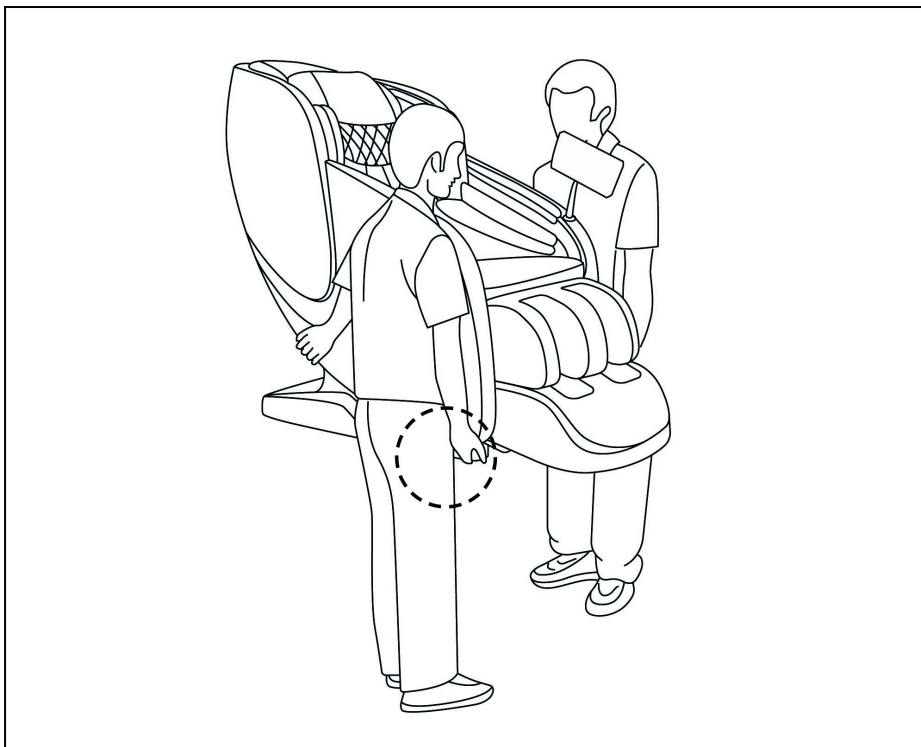


Рисунок 6 – Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

Примечание!



- Не тащите и не толкайте кресло, пока оно не установлено в нужное место.
- При перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания. Можно повредить кресло или получить удар током.
- Не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит.
- Перед тем как перемещать кресло, убедитесь, что оно отключено от сети.
- Можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол.

3.3 Размещение массажного кресла

Установите кресло не менее чем в 15 см от стены, а перед креслом оставьте 51 см свободного пространства.

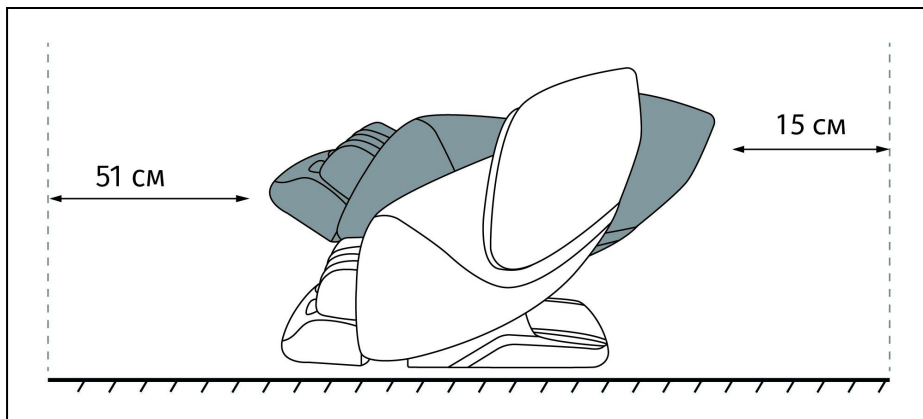


Рисунок 7 — Размещение массажного кресла

Примечание!



- Не ставьте кресло в помещениях с высокой влажностью (саунах, ванных комнатах).
- Поверхность пола должна быть ровной и нескользкой.
- Не используйте в запыленных помещениях, помещениях с температурой выше 400 °C, рядом с раскаленными объектами (например, рядом с плитой или духовкой).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или других объектов.

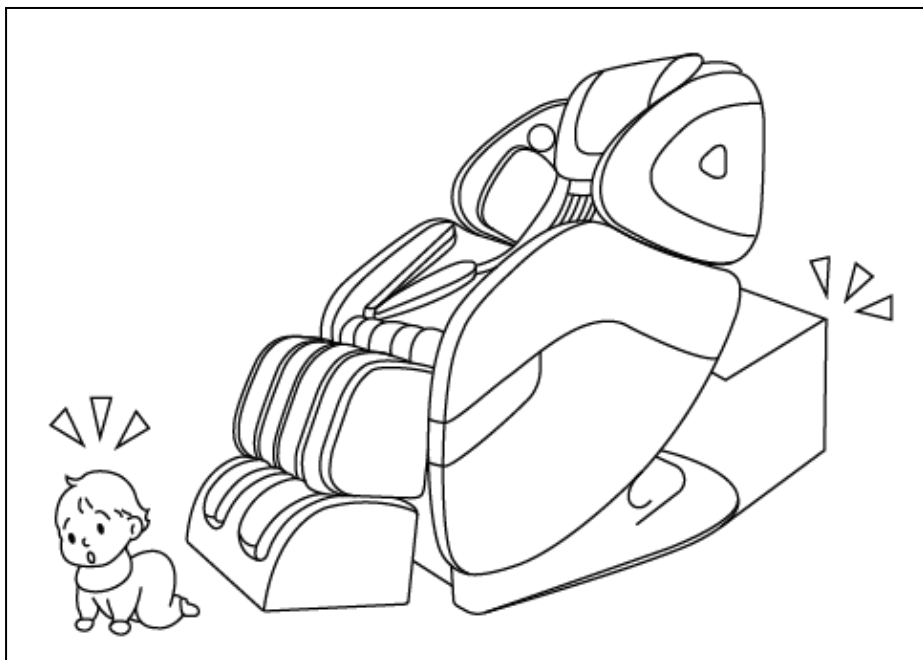


Рисунок 8 - Перед массажным креслом и за ним не должно быть посторонних предметов, домашних животных и детей

4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед тем как приступить к массажу, убедитесь, что между любыми его частями нет посторонних предметов;
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки;
- Не сажайте домашних животных на массажное кресло, его спинку или подлокотники.

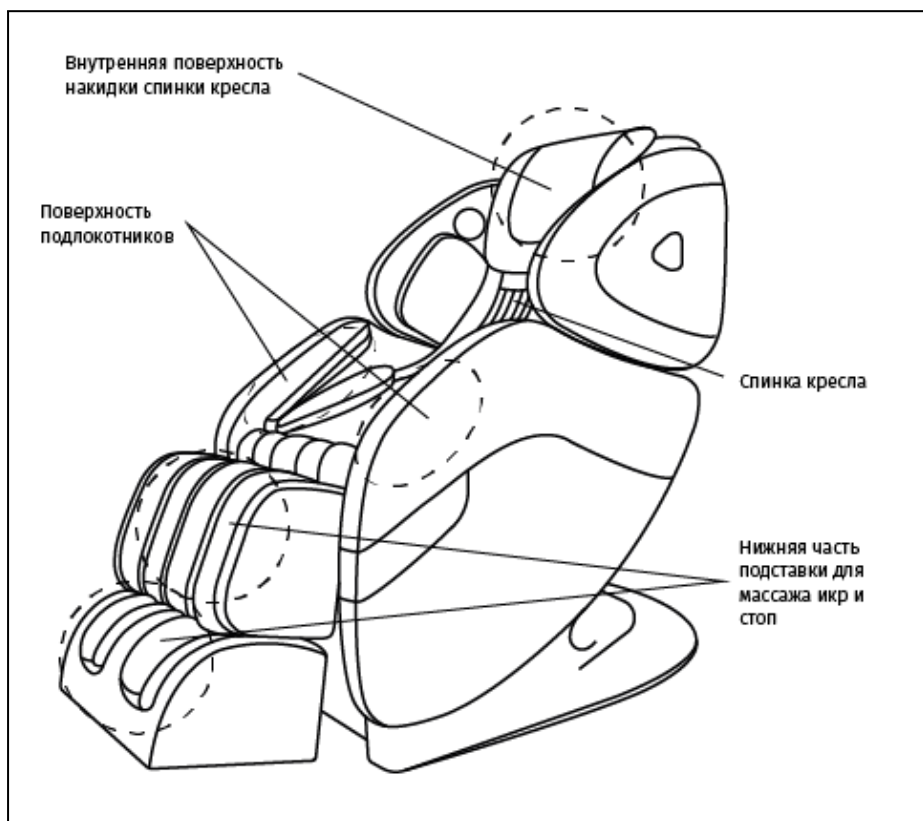


Рисунок 9 - Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

4.3 Включите питание кресла

- Плотно вставьте разъем питания в розетку блока сетевого выключателя;
- Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку;
- Переведите переключатель в положение «I».

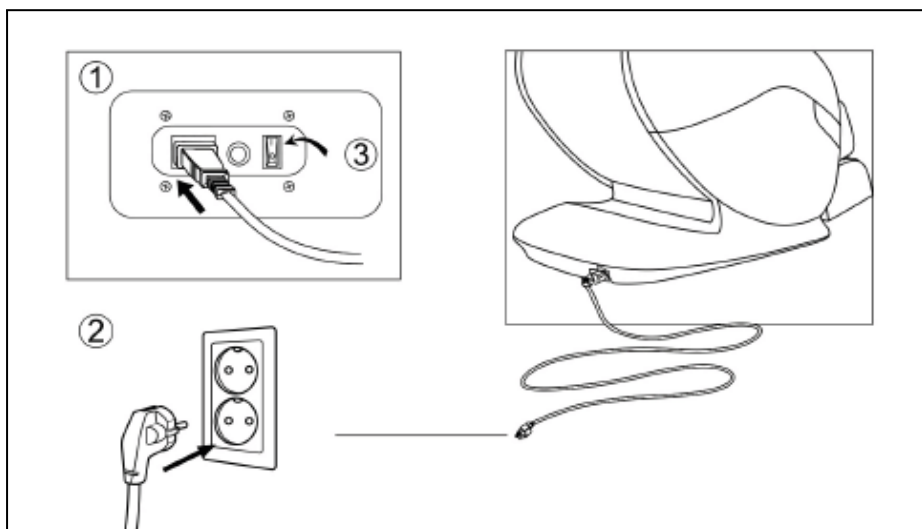


Рисунок 10 – Правильное включение массажного кресла

4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Если ролики находятся не в стационарном положении, нажмите кнопку «Вкл» на планшете управления, чтобы вернуть ролики в стационарное положение.



Рисунок 11 – Правильное положение роликов

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5.1 Включение массажного кресла

Убедитесь, что кнопка на задней панели питания находится в положении «0». Вставьте штепсель кабеля питания в разъем кресла. Убедитесь, что он не болтается в гнезде. Затем подключите кабель питания к розетке. Переключите кнопку питания в положение «1».



Не трогайте кабель питания, розетку или разъем мокрыми или влажными руками!

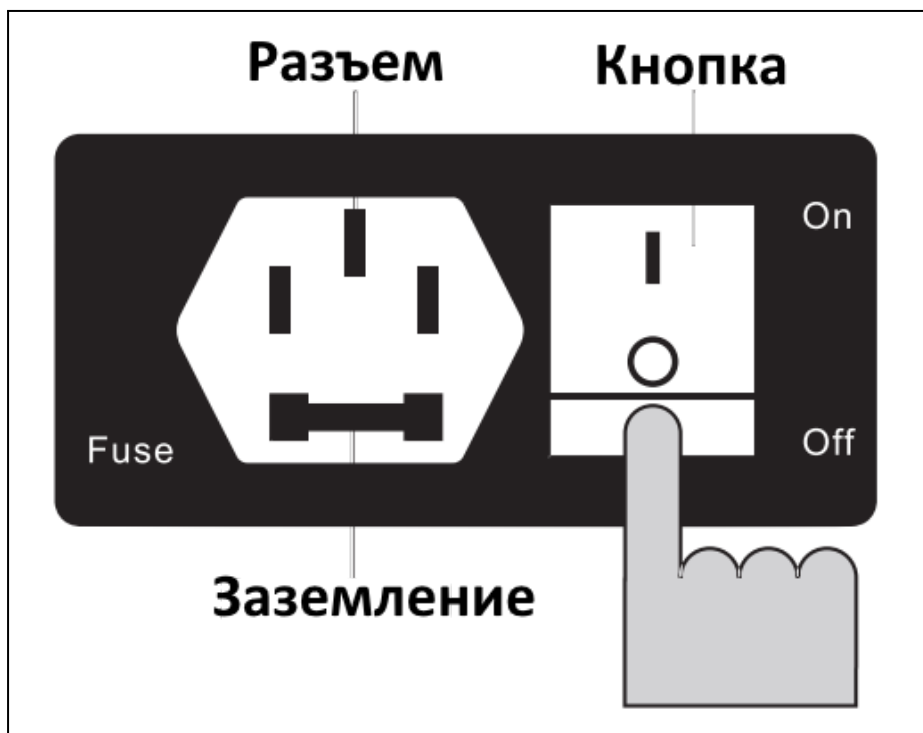


Рисунок 12 — Подключение массажного кресла

5.2 Начало сеанса массажа

Сядьте в кресло. Для включения зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на 1 секунду (кнопки управления и быстрого доступа к функциям расположены на правом подлокотнике).

5.3 Подключение по Bluetooth

На вашем смартфоне в меню соединения по Bluetooth найдите устройство Massage Chair и подключитесь к нему. Так вы сможете проигрывать музыку со смартфона через встроенные колонки массажного кресла.



*По умолчанию код для подключения либо отсутствует, либо это код **6666**.*

Вы можете одновременно подключить только одно устройство по Bluetooth.

5.4 Пауза и отключение

- **Автоматическое отключение.** В кресле предустановлен таймер, поэтому оно автоматически отключится через 15 минут. По умолчанию все автопрограммы рассчитаны на 15 минут работы;
- **Принудительная остановка.** Нажмите на значок «II» на экране или на кнопку «II» на панели быстрого доступа на подлокотнике. Для повторного запуска массажа снова нажмите эту кнопку;
- **Окончание массажа.** Нажмите значок для остановки работы кресла. Не покидайте кресла до полного поднятия спинки и полного опускания секции для ног;
- Выключите кнопку на задней панели питания после полного выключения кресла.

6. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ

6.1 Планшет управления



Рисунок 13 — Планшет управления

6.2 Кнопки управления на панели быстрого доступа

Панель быстрого доступа расположена на подлокотнике массажного кресла.

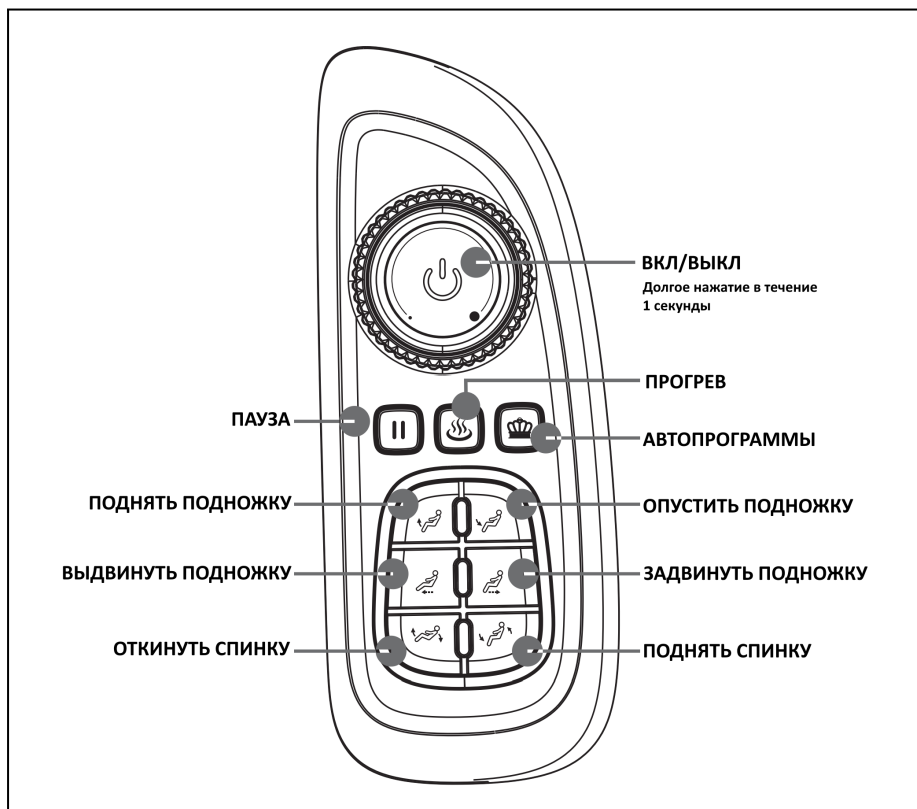


Рисунок 14 — Панель быстрого доступа на подлокотнике кресла

7. НАСТРОЙКА ПРОГРАММ МАССАЖА

В массажном кресле Orlauf Fink установлено 24 автоматические программы, которые разбиты на 3 группы:

- Классические;
- Индивидуальные;
- По зонам.

Чтобы перейти к выбору автоматических программ, перейдите в главное меню планшета управления. Для этого нажмите значок 🏠 в левом верхнем углу экрана. Затем нажмите один из значков «КЛАССИЧЕСКИЕ», «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ» или «ПО ЗОНАМ».

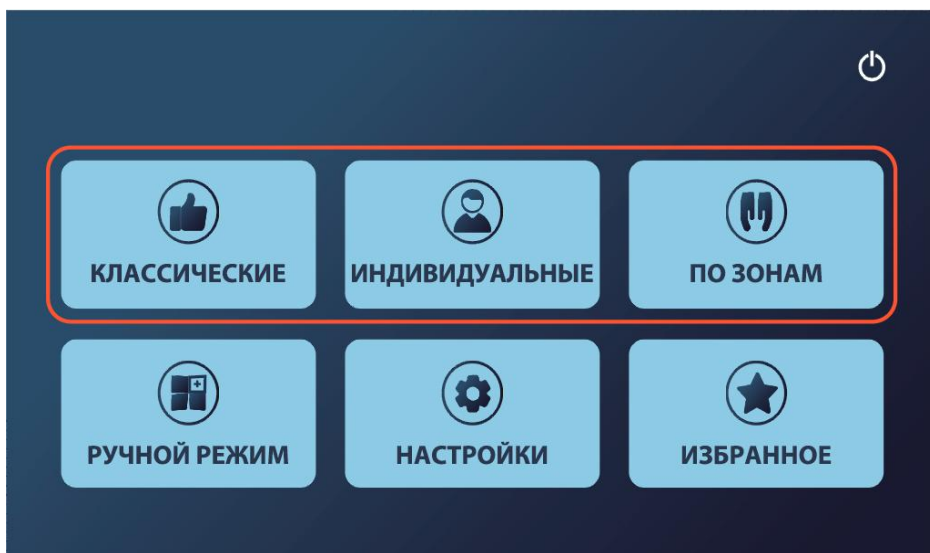


Рисунок 15 — Автоматические программы массажа

7.1 Обзор автопрограмм «КЛАССИЧЕСКИЕ»



Рисунок 16 – Классические автопрограммы массажа



ВСЕ ТЕЛО

Программа массажа, включающая разминание, постукивание и аэромассаж всего тела.



РАСТЯЖКА

Воздушные подушки мягко захватывают и удерживают плечи, ноги и руки, при этом спинка и подножка двигаются вверх и вниз для мягкой растяжки.

Программа способствует восстановлению мышц и мягкому растяжению.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа массажа с небольшой скоростью.

Включает разминание, постукивание и массаж всего тела воздушными подушками.



ЛЕГКОСТЬ

Сочетает в себе шицу, аэромассаж и постукивание.



ЗАРЯДКА

Сочетает разминание, постукивание и аэромассаж всего тела.



РАСЛАБЛЕНИЕ

Включает массаж с быстрым разминанием, постукиванием и аэромассажем, а также функцию качания.



АНТИСТРЕСС

Переключение между шицу и разминанием, а также аэромассаж всего тела.



БОДРОСТЬ

Программа сочетает разминание и аэромассаж всего тела.



Нажмите для возвращения на главный экран.

7.2 Обзор автопрограмм «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ»



Рисунок 17 – Индивидуальные автопрограммы массажа



БОСС

Программа для руководителей. Направлена на снятие стресса и напряжения.



ЛЕДИ

Программа для женщин, предусматривающая более деликатный и расслабляющий массаж.



КЛЕРК

Программа для офисных сотрудников и людей, ведущих сидячий образ жизни.

Особое внимание уделено шейно-воротниковой зоне и мышцам спины, фокус — на снятии стресса.



ГЕЙМЕР

Программа для тех, кто много времени проводит за компьютером или приставкой.

Успокаивающий массаж с упором на шейно-воротниковую зону и мышцы спины.



ВОДИТЕЛЬ

Программа для водителей.

Интенсивная расслабляющая проработка всего тела для снятия напряжения после дня, проведенного за рулем.



СПОРТСМЕН

Интенсивный массаж с глубокой и мощной проработкой всех зон для активных пользователей.



ПОЖИЛОЙ

Мягкий и комфортный массаж для людей в возрасте.



ЗДОРОВЬЕ

Программа для тех, кто большую часть времени проводит дома. Особый фокус на повышении тонуса мышц.

7.3 Обзор автопрограмм «ПО ЗОНАМ»

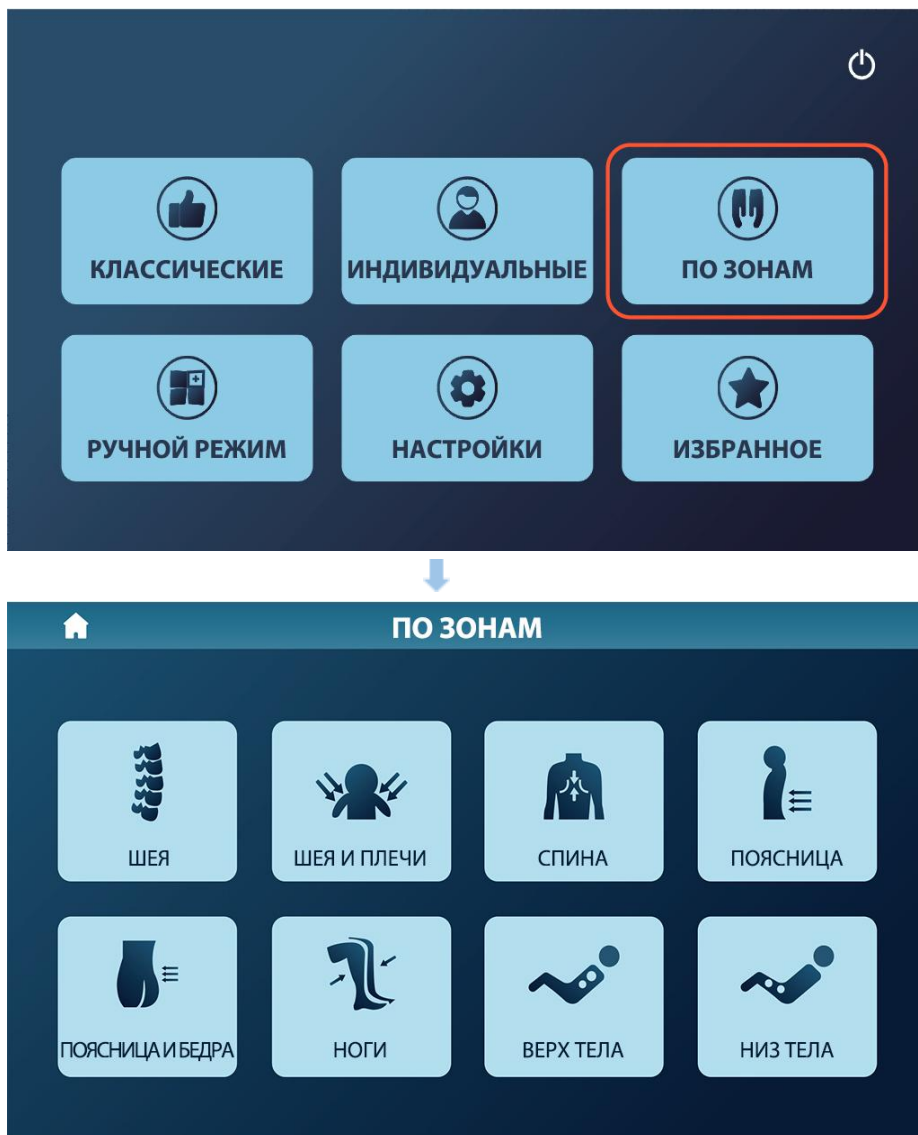


Рисунок 18 — Автопрограммы массажа по зонам



ШЕЯ

Программа, нацеленная на массаж шеи.



ШЕЯ И ПЛЕЧИ

Глубокая проработка шейно-воротниковой зоны.



СПИНА

Массаж всей спины.



ПОЯСНИЦА

Программа, сфокусированная на массаже поясницы.



ПОЯСНИЦА И БЕДРА

Проработка нижней части спины, поясницы, бедер и ягодиц.



НОГИ

Массаж с акцентом на расслаблении ног.



ВЕРХ ТЕЛА

Полный массаж верхней части тела от шеи до поясницы.



НИЗ ТЕЛА

Полный массаж нижней части тела от поясницы до стоп.

7.4 Дополнительные настройки автопрограмм

В кресле есть дополнительные параметры, которые можно настроить во время работы автопрограмм.

Все дополнительные настройки мы покажем на примере автоматической программы «Все тело».

Нажмите значок автопрограммы «Все тело», запустится режим сканирования тела. Откиньтесь на подушки, постарайтесь сесть максимально глубоко. Программа сканирования тела автоматически подстроит ролики под ваш рост.

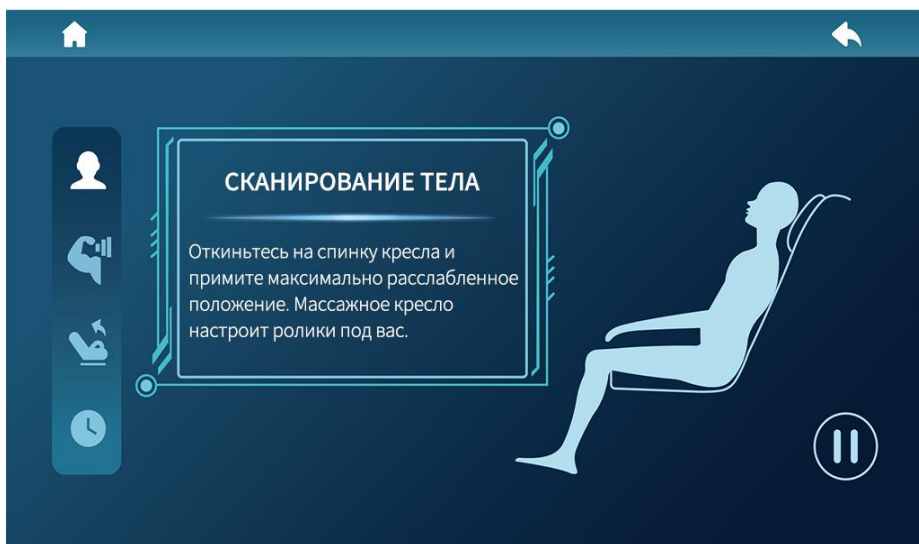
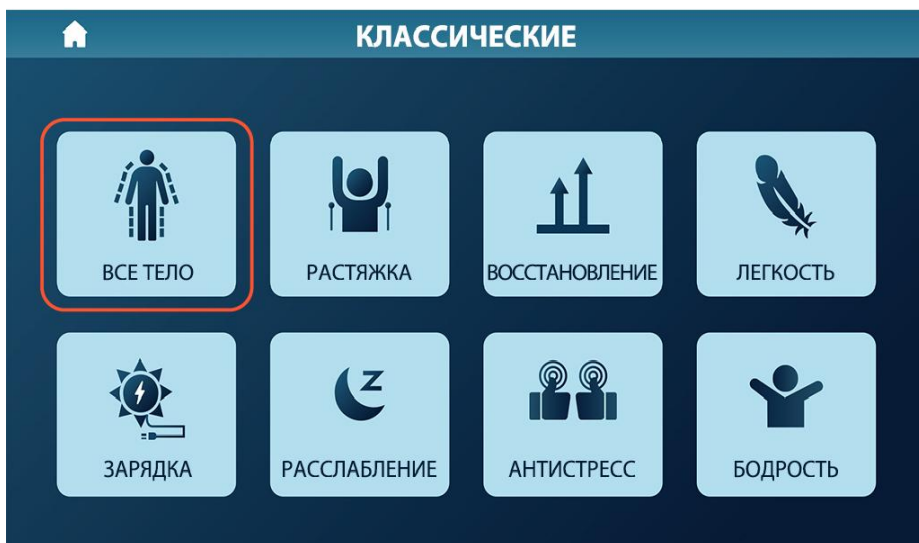


Рисунок 19 — Сканирование тела после запуска автопрограммы

Перед началом программы массажа можно отрегулировать положение роликов относительно шеи и плеч.



Рисунок 20 — Регулировка положения роликов перед началом программы массажа

Во время работы автопрограммы можно подключать и отключать следующие функции, показанные на рисунке ниже.



Рисунок 21 — Функции, которые можно изменить во время массажа



Прогрев поясницы.



Роликовый массаж стоп и икр.



Массаж воздушно-компрессионными подушками.



Добавить программу в список избранных.

7.5 Настройка мощности роликов и подушек



Нажмите этот значок, чтобы попасть в меню настройки мощности массажа.



Рисунок 22 — Регулировки интенсивности и скорости массажа

СИЛА МАССАЖА



Регулирует интенсивность роликов массажа.

СКОРОСТЬ РОЛИКОВ



Регулирует скорость движения роликов.

СИЛА АЭРО



Регулирует интенсивность массажа воздушными подушками.

7.6 Регулировка положения кресла



Нажмите этот значок, чтобы перейти в меню регулировки положения кресла.



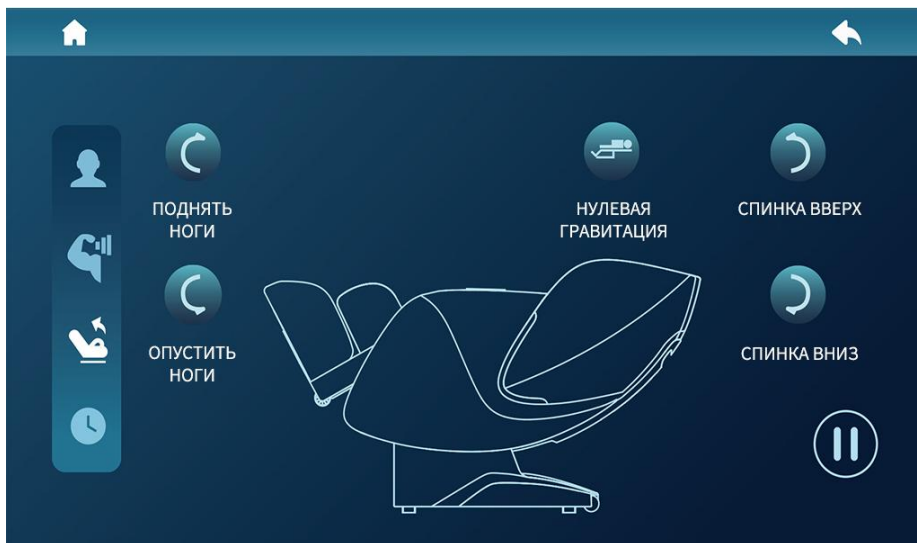



Рисунок 23 — Регулировка положения массажного кресла

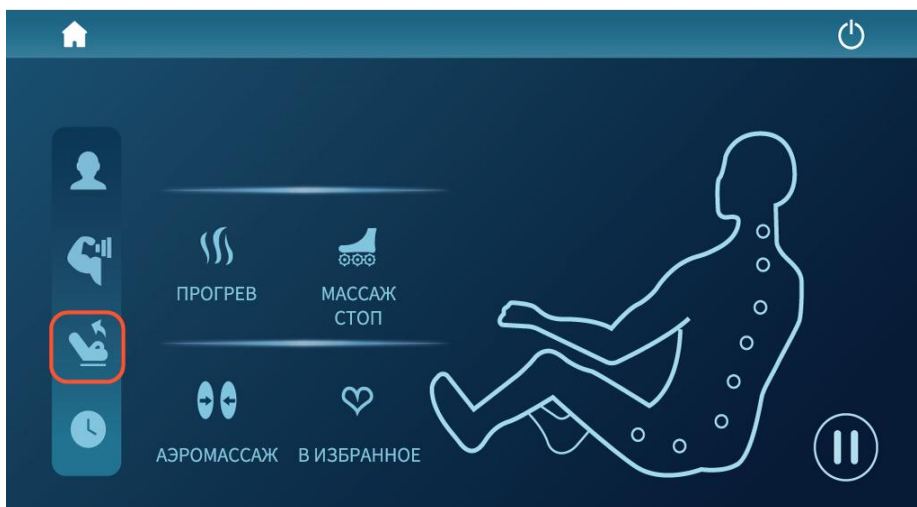

Нажмите, чтобы поднять секцию для ног.

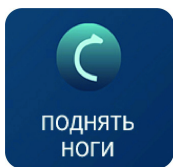


Нажмите, чтобы опустить секцию для ног.

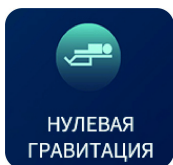

Нажмите, чтобы перейти в положение нулевой гравитации.



Нажмите, чтобы поднять спинку кресла.

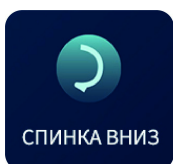

Нажмите, чтобы опустить спинку кресла.

7.7 Выбор времени работы программы



Нажмите этот значок, чтобы перейти в меню регулировки длительности массажа.

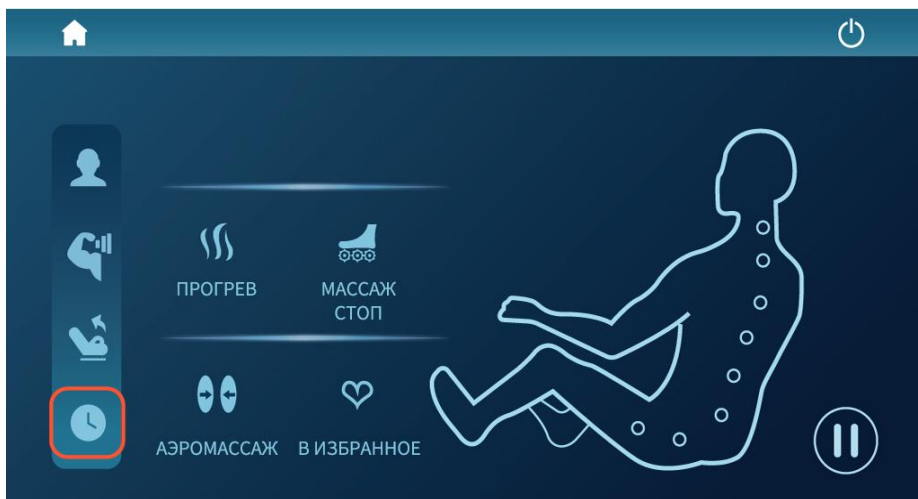


Рисунок 24 — Выбор продолжительности сеанса массажа

По умолчанию продолжительность программы — 15 минут. Продолжительность массажа можно изменять с шагом в 5 минут от 5 до 30 минут.

8. РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ МАССАЖА

Для ручной настройки массажа нажмите значок «РУЧНОЙ РЕЖИМ» на главном экране.

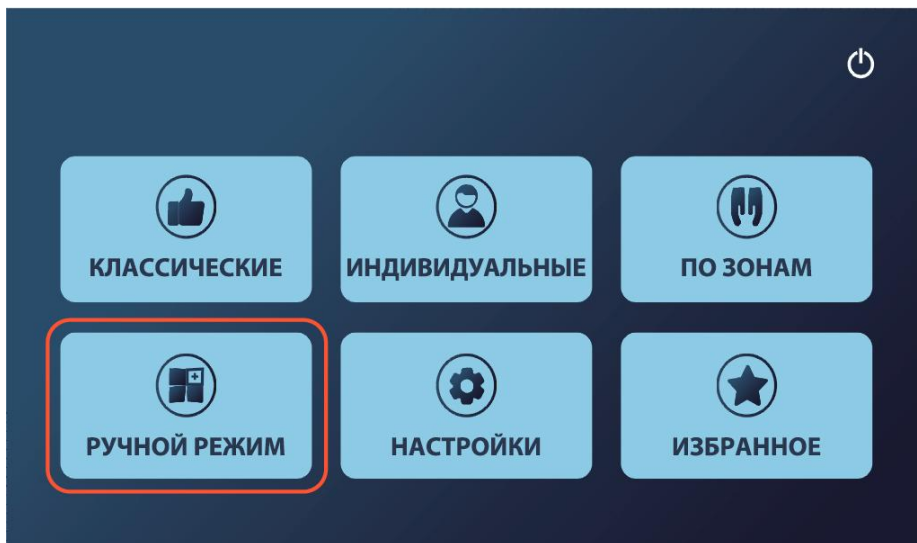


Рисунок 25 — Выбор меню ручных настроек

8.1 Выбор типа массажа

Чтобы выбрать тип роликового массажа, нажмите «ТИП МАССАЖА» и выберите один из представленных типов:

- Разминающий;
- Поколачивающий;
- Точечный;
- Похлопывающий;
- Постукивающий;
- Смешанный.



Рисунок 26 — Выбор типа роликового массажа

8.2 Выбор зоны массажа

Чтобы выбрать точку или область массажа, нажмите «РОЛИКИ» и выберите нужный режим.




Рисунок 27 — Настройки положения массажных роликов




Массаж одной выбранной точки.



Массаж области в 15 см от выбранной точки.

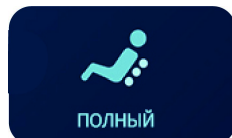

Массаж всей спины.

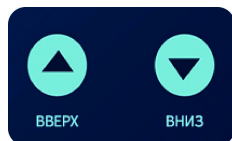

Перемещение роликов выше или ниже.

8.3 Выбор дополнительных возможностей массажа


Нажмите значок «ПРОЧЕЕ» и выберите необходимые функции.




Рисунок 28 — Функции, которые можно изменить во время массажа



Включает функцию прогрева области спины и поясницы.

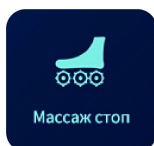

Включает роликовый массаж стоп и икр.

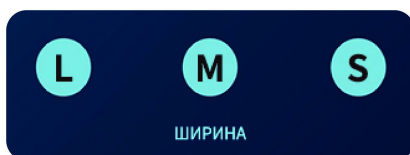

Выбор расстояния между роликами.

Предусмотрено 3 варианта расстояния:
L — широкий, M — средний и S — узкий.

8.4 Настройка аэромассажа



Рисунок 29 — Настройки воздушно-компрессионного массажа

В ручном режиме можно выбрать область воздушно-компрессионного массажа:

- **ВСЕ ТЕЛО** — аэромассаж всех зон;
- **ПЛЕЧИ** — аэромассаж плеч;
- **РУКИ** — аэромассаж рук;
- **ПОЯСНИЦА** — аэромассаж поясницы и бедер;
- **НОГИ** — аэромассаж ног и стоп.

8.5 Настройки планшета управления

Вы можете настроить язык, интенсивность подсветки, звук при касании экрана, таймер и Bluetooth.

Для выхода в меню настроек нажмите на главном экране «НАСТРОЙКИ».



Рисунок 30 – Настройки планшета управления

- **BLUETOOTH.** Включить или выключить Bluetooth;
- **ЯЗЫК.** Выбрать один из предустановленных языков;
- **ЗВУК КЛАВИШ.** Включить или выключить звук при касании экрана;
- **ОЖИДАНИЕ.** Настроить время перехода в режим ожидания от 1 минуты до «никогда»;
- **ПОДСВЕТКА.** Настроить интенсивность подсветки.

8.6 Выбор любимой программы массажа

Сохраняйте любимые программы массажа в отдельном разделе «ИЗБРАННОЕ».

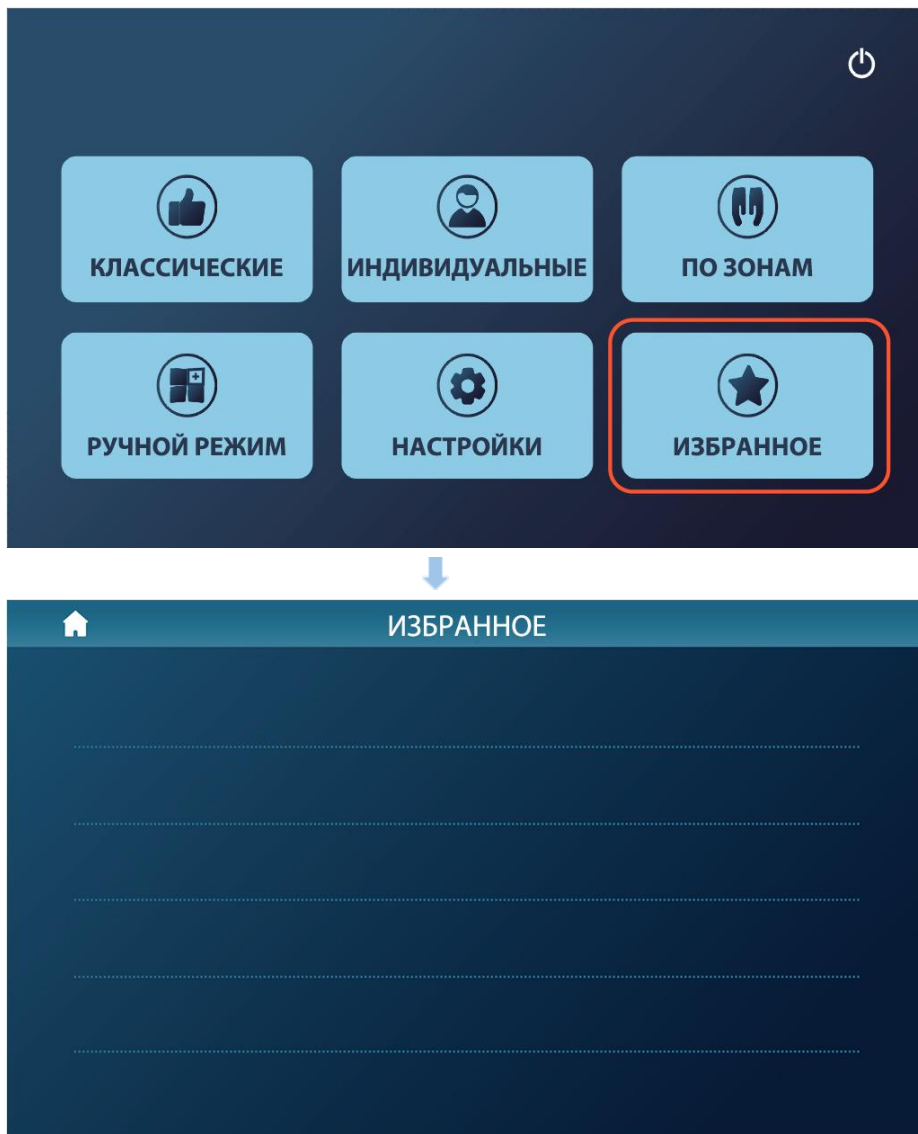


Рисунок 31 — Раздел «ИЗБРАННОЕ»

9. ЧИСТКА И УХОД

9.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью;
- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта;
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке;
- Не сушите поверхность с помощью фена;
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью;
- Синтетическая кожа кресла может обесцветиться при контакте с окрашенными волосами, поэтому место контакта с обивкой защищайте полотенцем;
- Если загрязнение удаляется с трудом, намочите меламиновую губку в нейтральном моющем средстве и используйте ее, чтобы очистить поверхность.

Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:

- Положите кусок мягкой ткани в воду или в 3-5% нейтральное моющее средство, затем выжмите его;
- Протрите мягкой тканью загрязненную поверхность;
- Протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства;
- Протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- Дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

9.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность;
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой;
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем как протереть планшет управления, еще раз тщательно выжмите ткань.

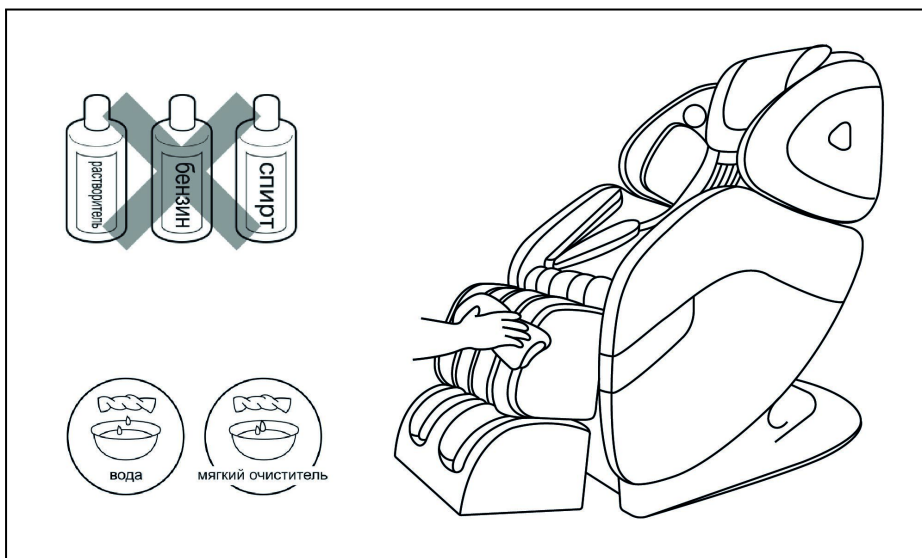


Рисунок 32 — Средства для очищения массажного кресла

10. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже правил, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:

- Выключите массажное кресло и отсоедините вилку от сети;
- Подождите 60 минут;
- Подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.

Таблица 4 — Список ошибок и способы их решения

Код	Проблемный пункт	Решение вопроса
Массажное кресло не работает.	Массажное кресло не подключено к питанию правильно.	Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла с питанием сети в вашем регионе и затем снова подключите кресло к питанию.
	У массажного кресла только что кончилось автоматическое время сеанса, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания.	Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл).
	Возможно, вы использовали массажное кресло без перерыва в течение 45 минут, из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова.

	<p>На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес.</p>	<p>Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и снова начните массаж.</p>
<p>Массажное кресло сильно нагрелось.</p>	<p>Массажное кресло непрерывно работало длительное время.</p>	<p>Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.</p>
<p>Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов.</p>	<p>Звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.</p>	<p>Шум от механизмов может быть слышен. Это нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.</p>

11. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Это массажное кресло оснащено сетевым шнуром со штекером и вилкой, имеющими заземляющий провод.



Внимание! Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, закажите установку подходящей розетки у квалифицированного электрика.

Это массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220В и имеет вилку заземления, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.



Рисунок 33 — Правильное заземление массажного кресла

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Fink
Напряжение питания	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	130 Вт
Таймер	10 минут
Максимальное время работы	30 минут
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	143x73x114 см
Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)	178x73x112 см
Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	115x77x116 см
Вес брутто	90 кг
Вес нетто	76 кг
Температура воздуха во время использования	0°-35 °С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Температура хранения	5°-35°С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло Orlauf Fink	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Пластиковый держатель планшета	1 шт.
Ключ шестигранник	1 шт.
Переходник на трубки подачи воздуха	2 шт.
Пластиковая стяжка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

14. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на два года. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	Orlauf
Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	Ningde Brilliant Massager Co., Ltd. 231D, building 2, No.6, Fuxin East Road, Chengbei street Fu'an City, Ningde City, Fujian Province, China Tel: 0086-13600546645
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	24 месяца
Срок службы	До 10 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.



