



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF GLORY



Дорожная подушка
для шеи

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного прибора. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- Не используйте во время купания или душа;
- Не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- Не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- На массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- Убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- Тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. Не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- Храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- Отключайте массажер от электросети во время грозы;
- Не накрывайте устройство во время его работы;
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не заряжается;
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем;
- Массажер предназначен для взрослых;

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера;
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором;
- Не используйте прибор, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо;
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваши недомогания и симптомы не проходят или ухудшаются после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу;
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме;
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера;
- Не используйте устройство более 20 минут подряд;
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями;
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером;
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер;
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли;
- Не используйте на улице;
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть;
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство;
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для шеи	1 шт.
Кабель питания с USB Type-C	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Износостойкое тканевое покрытие;
2. Кнопка включения прогрева;
3. Зарядный порт;
4. Кнопка питания;
5. Адаптер с кабелем питания.

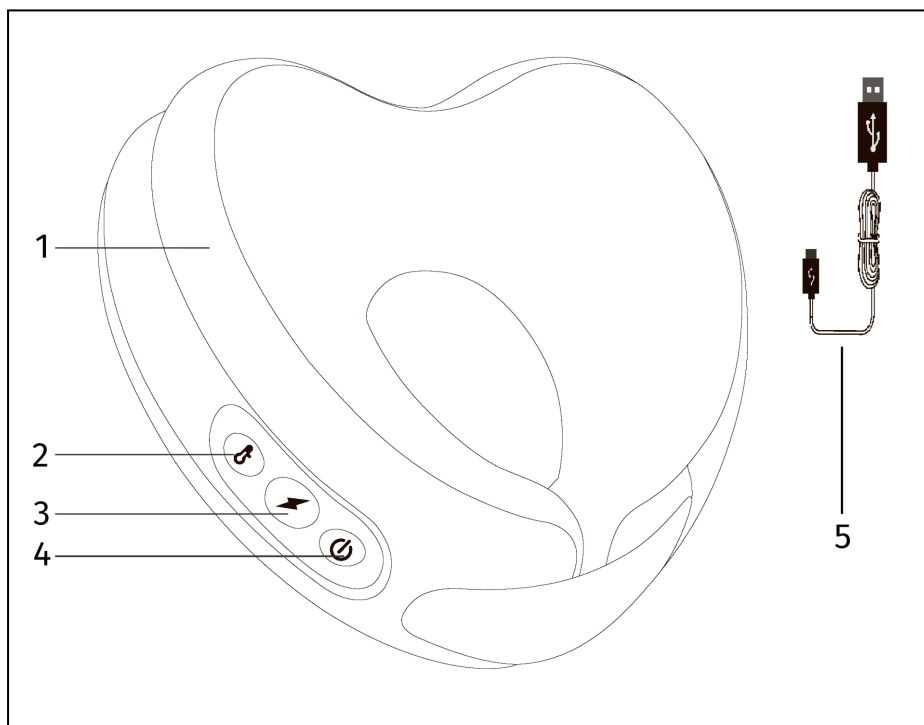


Рисунок 1 – Устройство массажера

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

4.1 Значения кнопок массажера

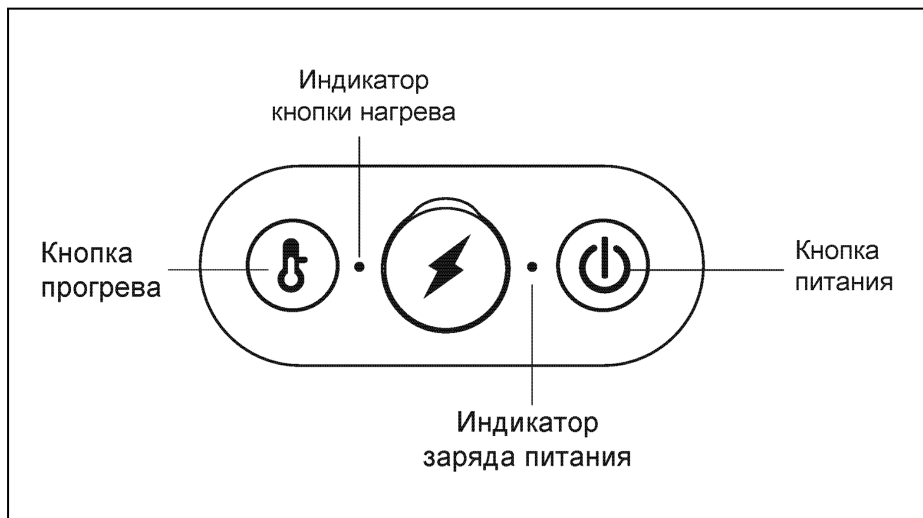


Рисунок 2 — Индикаторы массажера

Кнопка прогрева



- Нажмите кнопку один раз, чтобы включить прогрев на минимальной мощности. Индикатор будет гореть красным;
- Нажмите второй раз для переключения прогрева на максимальной мощности. Индикатор будет гореть красным;
- Нажмите третий раз для отключения режима прогрева. Индикатор погаснет.

Кнопка питания



Нажмите для запуска массажера. Массажер автоматически выдвинет массажные ролики и начнет массаж на высокой скорости.

Для смены режима работы роликов нажмите кнопку питания:

- **Интенсивный режим.** Запускается при активации массажера. Массажные ролики вращаются на высокой скорости в течение 10 минут, после чего

массажер автоматически отключается;

- **Расслабляющий режим.** Массажные ролики вращаются на низкой скорости в течение 10 минут, после чего массажер автоматически отключается;
- **Спящий режим.** Массажные ролики перестают вращаться и задвигаются обратно.

Индикатор заряда питания

- При зарядке индикатор питания мигает белым цветом. После полной зарядки белый свет горит постоянно;
- При снижении уровня заряда индикатор будет трижды мигать каждую минуту.



Внимание! Сеанс массажа длится 10 минут, после чего массажер отключается.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

Подключение. Включите Bluetooth на своем гаджете и выполните поиск. Выберите массажер из результатов поиска и подключитесь.

Воспроизведение музыки. После успешного подключения используйте свой гаджет для управления музыкой.



***Примечание.** Отключайте устройство, когда не используете его, чтобы другие пользователи могли подключаться к массажеру. В режиме запуска нажмите кнопку питания семь раз, чтобы перезагрузить Bluetooth.*

6. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте;
- Достаньте массажер из коробки;
- Полностью зарядите массажер перед первым применением согласно инструкции ниже;
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

7. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Подключите разъем зарядного кабеля к порту type-C, а другой конец — к порту USB;
- Включите питание. Индикатор питания начнет мигать белым цветом, а когда батарея будет полностью заряжена, индикатор питания будет гореть постоянно. Будьте внимательны, разъем немного нагревается во время зарядки;
- Полностью зарядите массажер перед использованием. Время зарядки составляет 2-3 часа. Отсоедините зарядный кабель вовремя после полной зарядки.

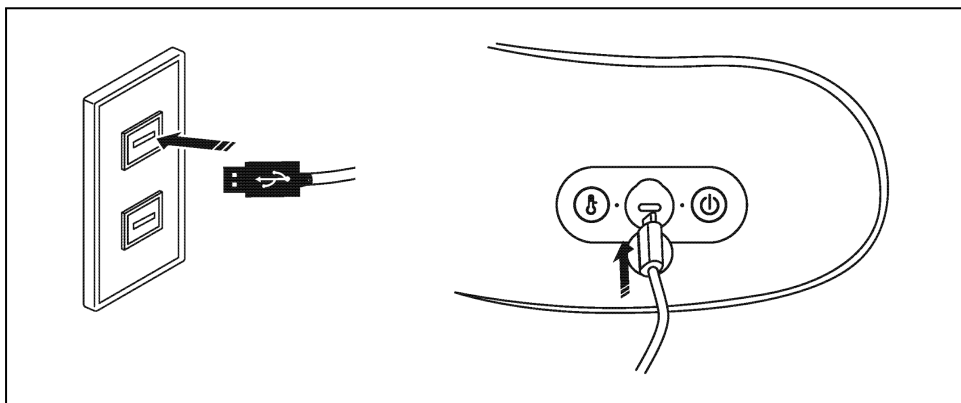


Рисунок 3 — Подключение кабеля для зарядки



Внимание!

Массажер не должен использоваться во время его зарядки.
Проверьте уровень заряда до начала работы с массажером.
Полностью зарядите массажер перед его первым применением.

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

Обращение с аккумуляторами:

- При контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Взрывоопасно! Никогда не бросайте аккумуляторы в огонь.
- Не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумуляторы.
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство.
- Перед первым использованием аккумуляторы должны быть полностью заряжены.
- Необходимо постоянно следить за правильной зарядкой.
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- Выключите питание массажера;
- Держите массажер отключенным в течение 60 минут;
- Включите питание.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не реагирует на нажатие кнопки.	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
	Массажер только что завершил работу (прошло 10 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку питания
Массажер перегревается.	Было выполнено несколько циклов по 10 минут. Слишком долго работает режим нагрева.	Выключите массажер и дайте ему остыть.

10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Массажные ролики	Динамические массажные манипуляторы на платформе
Функция прогрева	Да
Роликовый массаж	Да
Таймер (автоотключение через 10 мин)	Да
Размер (Д*Ш*В), см	25x24x10
Вес нетто, кг	0,8
Вес брутто, кг	1,2
Размер упаковки, см	25x26x11
Напряжение питания	5В 1А
Батарея	1800 мАч 7,4В
Мощность, Вт	5 Вт

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	Orlauf
Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	24 месяца
Срок службы	До 10 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



