



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ORLAUF LIGHT FOOT



Массажер для ног

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



*Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.*

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- Не используйте во время купания или душа;
- Не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- Не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- Не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. Немедленно отключите его;
- На массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- Убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических застёжек;
- Тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. Не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- Храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- Не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- Следите, чтобы шнур питания не защемлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- При хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- Если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- Отключайте массажер от электросети во время грозы;
- Не накрывайте устройство во время его работы;

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

## 1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для профессионального лечения;
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется;
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем;
- Массажер предназначен для взрослых;
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера;
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором;
- Не используйте продукт, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо;
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваше недомогание не проходит или ухудшается после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу;
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме;
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера;
- Не используйте это устройство более 20 минут подряд;
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями;
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

### 1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер;
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли;
- Не используйте на улице;
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть;
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство;
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте;
- После использования вытирайте пыль и грязь с массажера сухой мягкой тканью;
- Тканевую вставку для ног можно вытащить. Для нее подходит только ручная стирка: не стирайте и не отжимайте в стиральной машине, не сушите в сушильной машине!

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Массажер для ног           | 1 шт. |
| Кабель питания с адаптером | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

### 3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ

1. Секция для ног с моющейся тканью;
2. Консоль управления;
3. Корпус;
4. Ножки;
5. Кабель питания с адаптером.

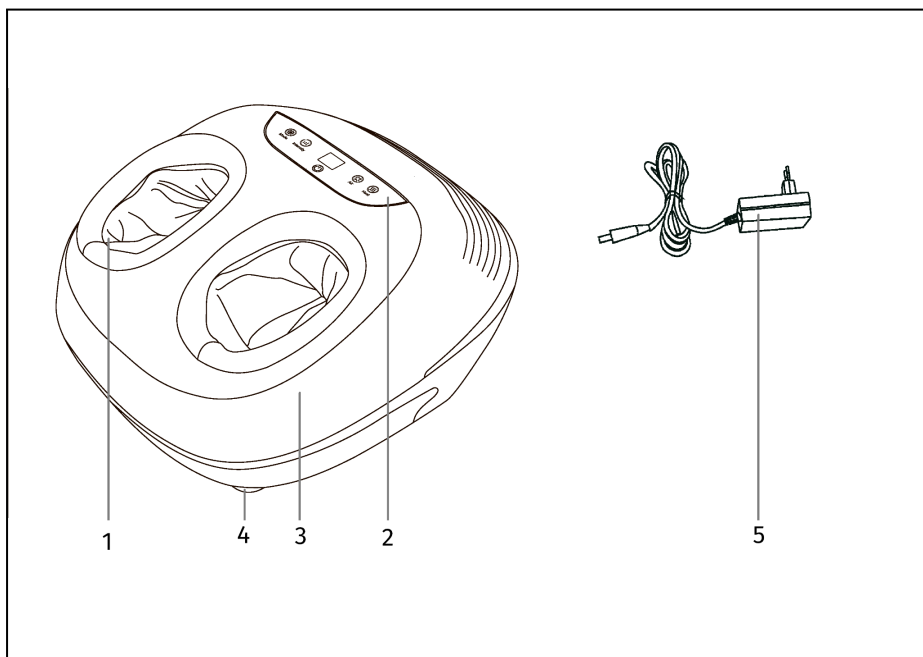


Рисунок 1 — Устройство массажера

## 4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

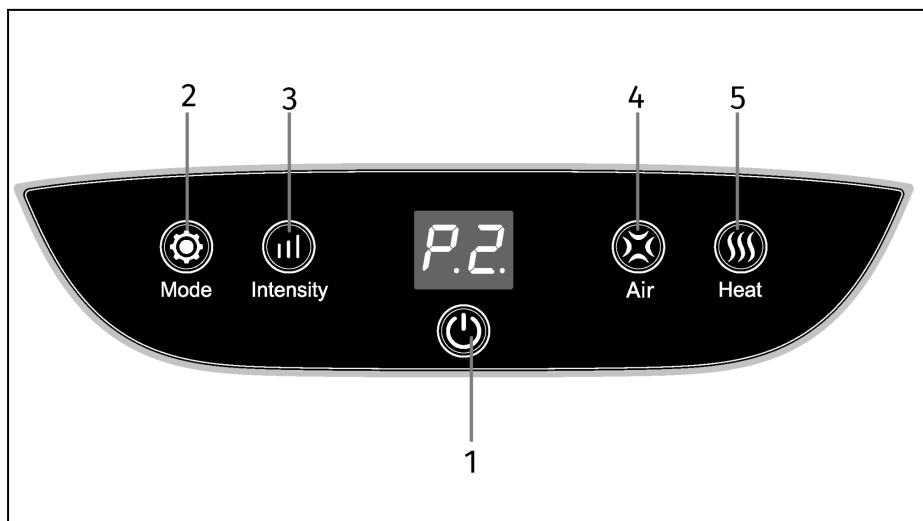


Рисунок 2 — Панель управления

### 1. Power (Вкл/Выкл)

Кнопка включения и выключения массажера. Нажмите и удерживайте кнопку для включения массажера. После включения загорится индикатор обратного отсчета (20 минут). Массаж начнется в Режиме 1 (P1) с мощностью воздушно-компрессионных подушек 1 (L1) и мощностью роликового массажа стоп 1 (b1).

Продолжительное нажатие на кнопку выключит массажер.

### 2. Mode (Режим)

Кнопка запускает одну из трех автоматических программ. Выбранная программа будет отражена на экране как P1, P2, P3 в течение 2 секунд после активации. Далее на экране будет отображаться обратный отсчет времени выполнения программы.

- **P1** (программа «Обновление»). Массаж с упором на проминание стоп и мягкое давление в области лодыжек и подъема стопы;
- **P2** (программа «Расслабление»). Упор на воздушно-компрессионный массаж пяток, подъем стопы и лодыжек. Роликовый массаж работает в прерывистом



режиме (с паузами);

- **P3** (программа «Здоровье»). Упор делается на глубокий и интенсивный роликовый массаж стоп, воздушно-компрессионный массаж выполняет вспомогательную функцию.

### **3. Intensity** (Интенсивность)

Кнопка управления мощностью роликового массажа. Каждое нажатие на кнопку переключает мощность в следующей последовательности:

- b1. Слабая мощность;
- b2 . Средняя мощность;
- b3. Высокая мощность;
- b0. Роликовый массаж отключен.

### **4. Air** (Воздушно-компрессионный массаж)

Кнопка управления мощностью воздушно-компрессионного массажа. Каждое нажатие на кнопку переключает мощность в следующей последовательности:

- L1. Слабая мощность;
- L2. Средняя мощность;
- L3. Высокая мощность;
- L0. Лимфодренажный массаж отключен

### **5. Heating** (Прогрев)

Кнопка управления функцией прогрева. Нажмите для включения прогрева, повторное нажатие отключит прогрев.

## 5. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте;
- Достаньте массажер из коробки;
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

## 6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разместите массажер на полу;
- Соедините кабель питания с адаптером. Раздастся характерный щелчок;
- Вставьте вилку адаптера в розетку (АС 220В, 50 Гц);
- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения устройства.

## 7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- Выключите питание массажера и выньте вилку шнура питания из розетки;
- Держите массажер отключенным от сети в течение 60 минут;
- Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку и включите питание;

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

| Проблема  | Возможная причина  | Возможное решение   |
|---|--|---|
| Массажер не реагирует на нажатия кнопок.                | Кабель питания не подключен.   | Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети. |
|   | Не нажата кнопка питания.  | Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.  |
| Массажер внезапно перестал работать в процессе массажа. | Отсутствует питание.   | Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети. |
|   | Было выполнено несколько циклов по 20 минут.   | Дайте прибору остыть в течение 20 минут. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.                     |
|   | Массажер только что завершил работу (прошло 20 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился. | Дайте прибору остыть в течение 20 минут. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.                     |
|   | Массажер перегружен.   | Расслабьте стопы.   |
| Звук  | Шум роликов, воздушно-компрессионных подушек и моторов во время работы является нормальным явлением        |   |

## 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

|   |  |
|---|--|
| <b>Массажные ролики</b>                             | Роликовый массажный механизм на платформе и отдельные массажные барабаны |
| <b>Функция прогрева</b>                             | Да   |
| <b>Роликовый массаж</b>                             | Да   |
| <b>Автоматические программы</b>                     | 3  |
| <b>Регулировка мощности лимфодренажного массажа</b> | 3 уровня   |
| <b>Регулировка мощности роликового массажа</b>      | 3 уровня   |
| <b>Таймер (автоотключение через 10 мин)</b>         | Да   |
| <b>Размер (Д*Ш*В), см</b>                           | 40x36x23   |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 3,6  |
| <b>Вес брутто, кг</b>                               | 5,0  |
| <b>Размер упаковки, см</b>                          | 44x42x27   |
| <b>Напряжение питания</b>                           | 220В/12В 3А  |
| <b>Мощность, Вт</b>                                 | 36   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Производитель</b>       | Orlauf   |
| <b>Поставщик/Импортер</b>  | Orlauf   |
| <b>Импортер</b>            | ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183,<br>Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С,<br>ИНН: 7805768366<br>ОГРН: 1207800096888<br>www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru<br>тел. 8-800-775-56-38 |
| <b>Завод-изготовитель</b>  | SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD<br>201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community,<br>HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China<br>+86-755-25185955              |
| <b>Страна изготовления</b> | КНР  |
| <b>Дата изготовления</b>   | Указана на этикетке  |
| <b>Гарантия</b>            | 24 месяца  |

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте [www.orkauf.com](http://www.orkauf.com)

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



