



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF PRIME



Массажер
для шеи и плеч

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- Не используйте во время купания или душа;
- Не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- Не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- На массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- Убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- Тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. Не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- Храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- Отключайте массажер от электросети во время грозы;
- Не накрывайте устройство во время его работы;
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не заряжается;
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем;
- Массажер предназначен для взрослых;
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера;
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором;
- Не используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо;
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваши недомогания и симптомы не проходят или ухудшаются после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу;
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме;
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера;
- Не используйте устройство более 20 минут подряд;
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями;
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером;
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром;
- Не используйте при наличии недиагностированной боли в спине.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер;
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли;
- Не используйте на улице;
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть;
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство;
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Кабель питания с адаптером	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Кнопки управления;
2. Массажные ролики анатомической формы с имитацией захвата руками;
3. Петли для рук;
4. Адаптер с кабелем питания.

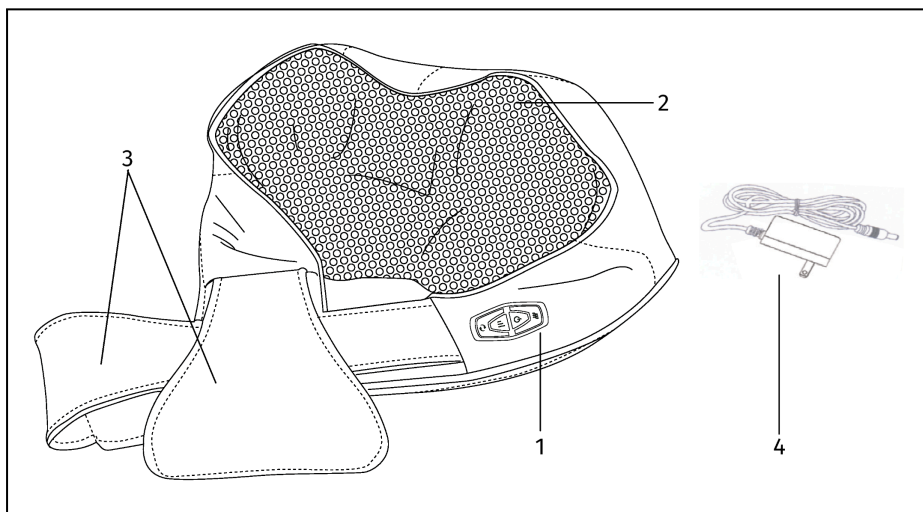


Рисунок 1 – Устройство массажера

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



Рисунок 2 — Управление



Кнопка включения прогрева. Во время работы массажера нажмите для включения прогрева. Повторно нажмите для его отключения;



Кнопка питания. Нажмите для запуска массажера. Сеанс массажа длится 15 минут, после чего массажер отключается;



Кнопка регулировки мощности массажа. Массажер начинает работу на максимальной мощности. Нажмите для переключения на малую мощность. Повторно нажмите для включения средней мощности;



Кнопка изменения направления вращения роликов. Нажмите для изменения направления вращения роликов. Массажер автоматически меняет направление вращения каждую минуту.

4.1 Устройство массажера

- Массажные ролики для разминающего и шиацу массажа;
- Петли для рук U-образной формы для большего расслабления;
- Панель управления.



Рисунок 3 — Устройство массажера

5. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА

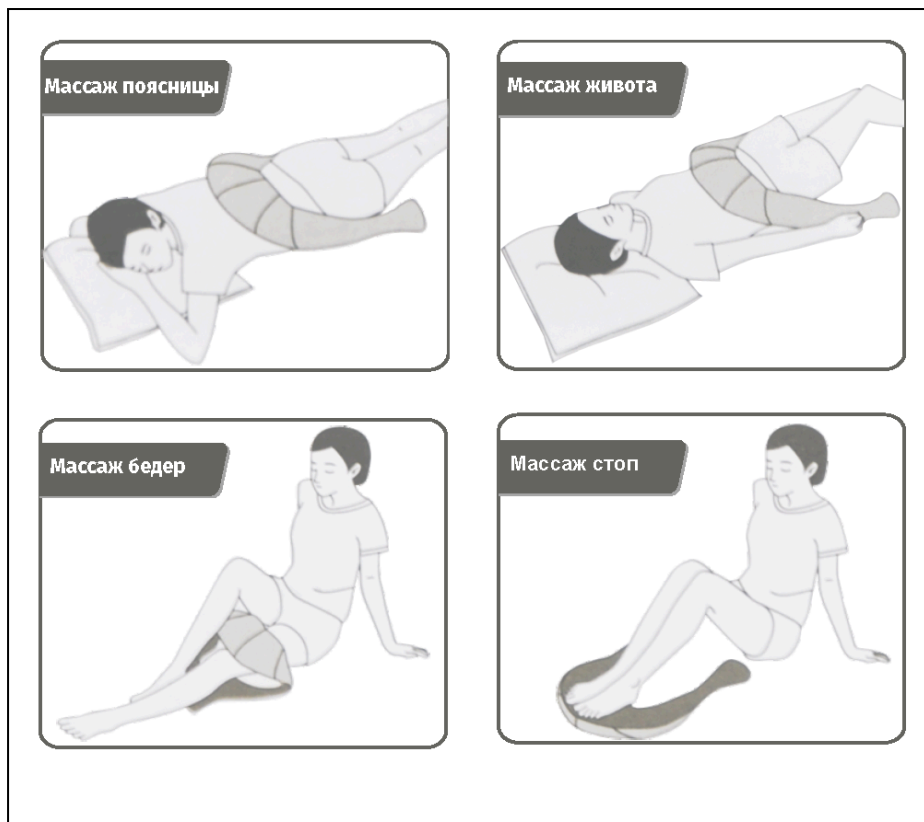


Рисунок 4 — Варианты использования массажера

6. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте;
- Достаньте массажер из коробки;
- Полностью зарядите массажер перед первым применением согласно инструкции ниже;
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

7. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Перед первым использованием полностью зарядите массажер;
- Вставьте адаптер переменного тока в разъем DC IN. Включите адаптер переменного тока в электрическую розетку;
- Светодиодный индикатор зарядки загорится красным;
- Светодиодный индикатор зарядки станет зеленым, когда массажер будет полностью заряжен;
- Приблизительное время зарядки составляет 3 часа.

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

Обращение с аккумуляторами:

- При контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- Взрывоопасно! Никогда не бросайте аккумуляторы в огонь;
- Не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумуляторы;
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство;
- Перед первым использованием аккумуляторы должны быть полностью заряжены;
- Необходимо постоянно следить за правильной зарядкой;
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- Выключите питание массажера;
- Держите массажер отключенным в течение 60 минут;
- Включите питание.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку включения.
	Массажер перегружен. Такое может случиться, если на него встать или положить на него тяжелый предмет.	Выключите массажер. Уберите нагрузку и запустите массажер повторно.
Массажер перегревается.	Было выполнено несколько циклов по 15 минут. Слишком долго работает режим прогрева.	Выключите массажер и дайте ему остыть.

10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Массажные ролики	Роликовая массажная система, имитирующая захват руками
Функция прогрева	Да
Роликовый массаж	Да
Массаж шиацу	Да
Таймер (автоотключение через 15 мин)	Да
Размер (Д*Ш*В), см	41x17x19
Вес нетто, кг	1,85
Вес брутто, кг	2,3
Размер упаковки, см	41x20x19
Напряжение питания	220В/9В 2А
Батарея	2200 мАч 7,4В
Мощность, Вт	18 Вт
Примерное время работы	90 минут
Примерное время зарядки батареи	3 часа

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	Orlauf
Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	24 месяца
Срок службы	До 10 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



